

SleepStyle™ 200

CPAP SERIES

Ambient
Tracking®
Plus

Fiche technique

Une solution PPC polyvalente



La gamme innovante de PPC
SleepStyle™ 200 vous offre:

- Technologie exclusive
d'humidificateur auto-régulé
- Amélioration des
performances PPC
- Meilleurs résultats cliniques,
de qualité des soins, et en
termes commerciaux

SleepStyle™


EFFICACITÉ DU SOMMEIL POUR
UNE VIE PLUS DYNAMIQUE

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

Performance + Polyvalence = Résultats

La gamme de PPC **SleepStyle™ 200** – la toute nouvelle gamme polyvalente de PPC standard et intégrés offre une meilleure qualité de sommeil avec **meilleurs résultats cliniques, commerciaux, et de qualité des soins.**

Ambient
Tracking®
Plus

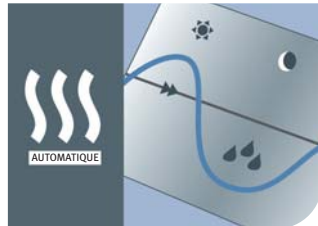


RESULTATS CLINIQUES

La plupart des humidificateurs traditionnels provoquent de la condensation dans le circuit patient ce qui provoque du bruit et des vibrations désagréables ainsi que l'instabilité de la pression dans le masque. La recherche a montré que 10 ml de condensation provoque une baisse de pression de 5,6 cmH₂O au niveau du masque¹.

Ambient Tracking® Plus équilibre l'humidité afin de fournir un traitement très économique qui s'adapte aux changements atmosphériques:

- Changements de température – réduisant la condensation
- Diminution de l'humidité lors de fuites (se produit jusqu'à 30% du temps de sommeil²) – maximise l'humidité

Figure 1 : Pression dans le masque avec et sans condensation dans le circuit (adaptation de Bacon et al, 2000)

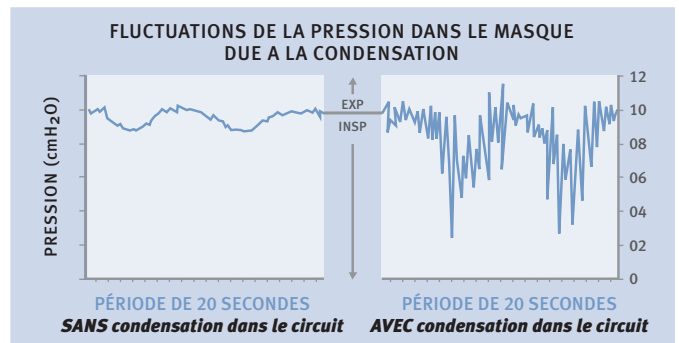

RÉSULTATS EN TERMES DE SOINS

La **gamme PPC SleepStyle™ 200** a été conçue pour une **intégration simple**. Cette conception vraiment intégrée est le dénominateur commun de tous les modèles standard et à humidification de la **gamme PPC SleepStyle™ 200**.

Cette simplicité permet la rapidité et la facilité:

- de l'installation et de l'utilisation
- De la transformation en humidification froide ou chauffante
- Du nettoyage et de l'entretien

Le même menu de navigation intuitif est commun à tous les modèles. Les fournisseurs et les patients peuvent mettre à jour facilement le traitement grâce à une clé électronique. Pour les voyages, une PPC robuste et compact pouvant s'ajuster à l'altitude et au voltage partout dans le monde.



Kit de conversion Humidification à froid HC013



Kit de conversion Humidification chauffée HC014

RESULTATS COMMERCIAUX


La Gamme PPC SleepStyle™ 200 est conçue pour vous économiser du temps et de l'argent.

Des caractéristiques qui raccourcissent les temps d'installation et de réglages :

- Traitements polyvalents permettant de changer d'un PPC standard à une humidification froide ou chauffante (électroniquement) à n'importe quel moment durant le traitement.
- Conception monobloc de la chambre
- Menu de navigation intuitif comprenant l'ajustement direct de l'humidité.
- Le suivi du patient génère une synthèse d'une page sur simple appel téléphonique ou un rapport plus détaillé téléchargeable.

Des caractéristiques à valeur ajoutée améliorant la tolérance :

- Ambient Tracking® Plus – technologie brevetée d'humidification auto régulée
- Rampe proportionnelle - Baisse temporaire de la pression afin de permettre l'endormissement.

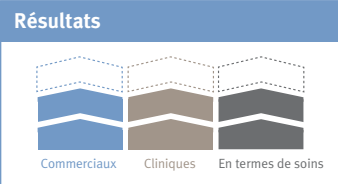

Nous aussi, ce qui nous intéresse, ce sont vos résultats. Ces résultats optimisés sont obtenus grâce à des caractéristiques hautement performantes.



Le tableau ci-dessous récapitule l'éventail des caractéristiques disponibles dans la gamme PPC SleepStyle™ 200.

Gamme SleepStyle™ 200			Produits*					
Catégories des performances	Caractéristiques		231	232	233	234	236	238
Système d'humidification	A	Système convertible/réversible (Léchage à froid / Humidification chauffante)	●	●			●	
	B	Système intégré			●	●		●
	C	Ambient Tracking® Plus			●	●		●
Suivi de performances	E	Logiciel Compliance Maximizer™		●		●	●	●
	F	Logiciel Titration Maximizer™	●	●	●	●	●	●
Contrôle de pression	G	Contrôle de l'ajustement de pression	Manuel	●	●	●	●	
	Automatique						●	●
	H	Compensation de fuites					●	●

* Certains modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays

CLE	◀ ⋯ ▶	Assure la conversion vers ce modèle en utilisant le kit de conversion	Kit de conversion HC013 – Humidification à froid Kit de conversion HC014 – Humidification chauffée
-----	-------	---	---

SleepStyle™ 200 CPAP Series

- **PERFORMANCES** – les performances PPC ont été améliorées grâce à une plage de pressions plus large et à une réduction des niveaux sonores.
- **AMBIENT TRACKING® PLUS** est une technologie exclusive qui permet une meilleure humidification et de meilleures performances cliniques et qui surclasse les humidificateurs traditionnels.
- **POLYVALENCE** - Traitements polyvalents permettant de changer d'un PPC standard à une humidification froide ou chauffante à n'importe quel moment durant le traitement.
- **FACILITE D'UTILISATION** - Un nouveau menu intuitif, un fonctionnement silencieux et un design compact s'ajoutent à une installation facile et rapide pour le fournisseur de soins.



La **gamme de PPC SleepStyle™ 200** vous permettra de procurer un bien être 24h/24 à vos patients.

Nos technologies avancées vous donnent les meilleures performances en termes de sommeil, pour une vie plus dynamique. **Pour tout complément d'information, ou pour accéder à la gamme complète de PPC SleepStyle™, visitez notre site www.fphcare.com.**

Ambient Tracking® Plus

NOTRE GAMME DE PPC SLEEPSTYLE™ 200 INCLUT:

- PPC
- Le sac de transport
- 2 x chambre d'humidification
- Circuit patient
- Filtre poussières
- Entonnoir

ACCESSOIRES

HC013	Kit de conversion HC013 – Humidification à froid
HC014	Kit de conversion HC014 – Humidification chauffée
HC355*	Chambre d'humidification réutilisable HC355*
HC385S	Chambre d'humidification standard HC385S
900HC240	Filtre poussières (pack de 2) 900HC240
900HC221	900HC221 Circuit Patient
900HC230	Logiciel Compliance Maximizer™
900HC232	Cable série pour téléchargement des données de suivi
900HC607	Titration Maximizer Software
900HC236	Isolated Serial Adaptor
900HC226	Kit d'extension pour HC225

SPECIFICATIONS PRODUIT

Dimensions:	10.8" x 6.7" x 5.5" (275mm x 170mm x 140mm)
Poids:	2 kg (4,4 lbs)
Capacité de la Chambre :	400ml
Puissance électrique :	
Fréquence	40-60Hz
Voltage et ampérage	110-115V ~ (1.2A, 1.3A max) 220-240V ~ (0.8A, 1.8A max)
Pression:	4-20 cmH ₂ O



GAMME STANDARD SleepStyle™



GAMME PPC INTEGRES SleepStyle™

* Disponibilité selon les pays

REFERENCES: 1. Bacon JP, Farney RJ, Jensen RL et al: Les PPC classiques ne maintiennent pas la pression de consigne, c'est ce qu'indiquent les tests réalisés dans des conditions cliniques simulées. Chest 2000; 118 (5):1441-9. 2. Martins De Araujo MT, Vieira SB, Vazquez EC et al: Humidification chauffante ou masque facial pour éviter la sécheresse des voies respiratoires supérieures lors de traitements PPC. Chest 2000; 1117 (1):142-7.

POUR TOUT COMPLEMENT D'INFORMATION, MERCI DE BIEN VOULOIR PRENDRE CONTACT AVEC VOTRE CONSEILLER FISHER & PAYKEL HEALTHCARE:

Fisher & Paykel Healthcare améliore sans cesse ses produits et se réserve le droit de modifier les spécifications de ses produits sans préavis. Brevets déposés dans les principaux pays du monde.

International P O Box 14 348, Panmure, Auckland 1134, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fphcare.com Web: www.fphcare.com **USA** Tel: 1800 446 3908 +1 949 470 3900 Fax: +1 949 470 3933 **Australia** Tel: +61 3 9879 5022 Fax: +61 3 9879 5232 **Austria** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22 **Benelux** Tel: +31 78 644 0924 Fax: +31 78 644 0914 **China** Tel: +86 20 8363 4286 Fax: +86 20 8363 3595 **France** Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 **Germany** Tel: +49 7182 93777 0 Fax: +49 7182 93777 99 **India** Tel: +91 80 5123 6041 Fax: +91 80 5123 6044 **Irish Republic** Tel: 1800 409 011 **Italy** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japan** Tel: +81 3 3661 7205 Fax: +81 3 3661 7206 **Spain** Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 **Switzerland** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **UK (EU Authorised Representative)** Tel: +44 1628 626 136 Fax: +44 1628 626 146 **Nthn Ireland** Tel: 0800 132 189