

SleepStyle™ 200

CPAP SERIES

Ambient
Tracking®
Plus

Technische Daten

Eine umfassendes CPAP-Sortiment



Die SleepStyle™ 200 CPAP-Serie mit innovativem Design bietet:

- Einzigartige, selbstregulierende Befeuchtungstechnologie
- Modifizierte CPAP-Leistung
- Effiziente klinische, pflegerische und wirtschaftliche Ergebnisse

SleepStyle™
GUTER SCHLAF FÜR NEUE
LEBENSENERGIE

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

Leistungsstärke + Vielseitigkeit = Qualität

Die **SleepStyle™ 200 CPAP-Serie** – eine völlig neue, leistungsstarke Serie von Standard- und integrierten CPAP-Systemen sorgt für erholsamen Schlaf und erzielt effiziente **klinische, pflegerische und wirtschaftliche** Ergebnisse.

Ambient
Tracking®
Plus

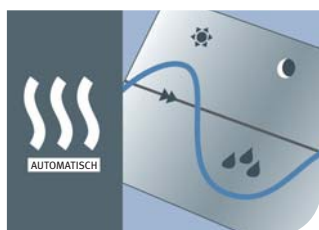


Abb. 1: Maskendruck mit und ohne Kondenswasser im Beatmungsschlauch (nach Bacon et al, 2000)


KLINISCHE ERGEBNISSE

Eine häufige Nebenwirkung von herkömmlichen Befeuchtern ist die Ansammlung von Wasser (Kondensation) im Beatmungsschlauch, was zu störenden Gurgelgeräuschen und Schlauchvibrationen führt. Forschungsergebnisse bestätigen, dass bereits 10ml Kondenswasser zu einem Druckabfall von 5,6 cm H₂O an der Maske führen können.¹

Ambient Tracking® Plus sorgt für ausgeglichene, selbstregulierte Feuchtigkeit, um auch unter wechselnden Bedingungen eine wirksame CPAP-Therapie zu gewährleisten:

- Temperaturschwankungen – Kondensation wird auf ein Minimum beschränkt.
- Feuchtigkeitsverluste durch Leckagen (treten während 30% der Schlafzeit auf)² - Feuchtigkeitszufuhr wird maximiert.

DURCH KONDENSATION VERURSACHTE THERAPIEDRUCKSCHWANKUNGEN

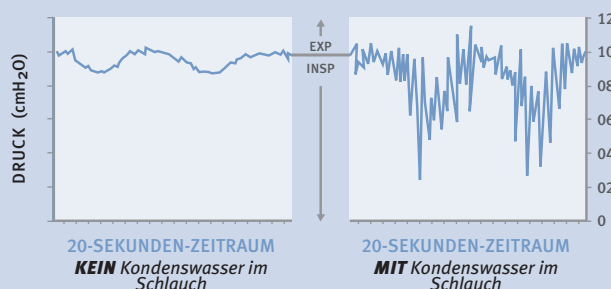

PFLEGERISCHE ERGEBNISSE

Bei der Entwicklung der leistungsstarken **SleepStyle™ 200 CPAP-Serie** stand die Anwenderfreundlichkeit im Vordergrund. Das komplett integrierte, kompakte Design ist eines der herausragenden Merkmale, das allen Standard- und Befeuchtermodellen der **SleepStyle™ 200 CPAP-Serie** gemeinsam ist.

Anwenderfreundlich bedeutet:

- Einfach in Aufbau und Bedienung
- Einfache Umstellung auf unbeheizte oder beheizte Befeuchtung
- Einfache Reinigung und Wartung

Alle Modelle bieten ein ausgereiftes, intuitives Navigationsmenü. Fachhändler und Patienten können die Therapie mit einem elektronischen Schlüssel problemlos erweitern. Das CPAP-Gerät ist **robust und kompakt**, d.h. praktisch auf Reisen, da auch Höhenlage und Netzspannung einfach auf jeden Standort einzustellen sind.





HC013 Aufrüstsatz für unbeheizten Betrieb



HC014 Aufrüstsatz für beheizten Betrieb mit spülmaschinenfester Kammer

WIRTSCHAFTLICHE ERGEBNISSE


Mit der leistungsstarken SleepStyle™ 200 CPAP-Serie sparen Sie Zeit und Geld.

Zeitsparende Produktvorteile sorgen für mühelosen Aufbau und weniger Nachfragen seitens des Patienten:

- Vielseitige Gerätekonfiguration ermöglicht die mühelose (elektronische) Umstellung von Standard-CPAP auf unbeheizte oder beheizte Befeuchtung in jedem Stadium der Therapie.
- Funktionale, spülmaschinenfeste Kammer.
- Intuitives Navigationsmenü inkl. Feuchtigkeitsanpassung in einfachen Schritten.
- Überwachung der Therapietreue mittels eines einseitigen Kurzberichts per Telefon oder eines ausführlicheren Berichts per PC-Datendownload.

Innovative Produktmerkmale zur leichteren Compliance:

- Ambient Tracking® Plus – patentierte, selbstregulierende Befeuchtungstechnologie
- Proportionalrampe – kurzfristige Drucksenkung erleichtert das Einschlafen

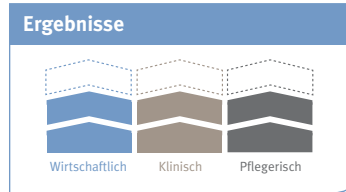

In unserem Bereich geht es ebenso wie in Ihrem um erstklassige Leistung. Optimale Ergebnisse sind das Resultat von leistungsstarken Produkten.



Auf der nachstehenden Tabelle sind die Leistungsmerkmale der SleepStyle™ 200 CPAP-Serie auf einen Blick dargestellt.

SleepStyle™ 200 CPAP-Serie			Modelle*					
Leistungs-kategorie	Leistungsmerkmale		231	232	233	234	236	238
Feuchtigkeitsabgabe	A	Aufrüst~/rückstellbares System (Unbeheizte (Cold Passover) Befeuchtung / Beheizte Befeuchtung)	●	●	●	●	●	●
	B	Voll integriertes System			●	●		●
	C	Ambient Tracking® Plus			●	●		●
Leistungsprotokoll	E	Compliance Maximizer™ Software		●		●	●	●
	F	Titration Maximizer™ Software	●	●	●	●	●	●
Drucksteuerung	G	Höheneinstellung	●	●	●	●		
		Manuell / Automatisch					●	●
	H	Leckenausgleich					●	●

* Einige Modelle sind nicht in allen Ländern erhältlich

ERLÄUTERUNG	◀ • • • ▶	Umwandlung mit dem Aufrüst~/Rückstellungsatz auf folgendes Modell:	HC013 Rückstellungsatz – Unbeheizte Befeuchtung
			HC014 Aufrüstsatz – Beheizte Befeuchtung mit spülmaschinenfester Kammer

SleepStyle™ 200 CPAP Series

- **LEISTUNGSSTARK** - die CPAP-Leistung wurde durch einen erweiterten Druckbereich und die Geräuschreduzierung optimiert.
- **AMBIENT TRACKING® PLUS** ist eine einzigartige Technologie zur Verbesserung von Befeuchtung und klinischer Leistung, die herkömmliche Befeuchter weit hinter sich lässt.
- **VIELSEITIGKEIT** - die Therapie kann jeder Zeit von Standard-CPAP auf unbeheizte oder beheizte Befeuchtung umgestellt werden.
- **ANWENDERFREUNDLICH** - völlig neues, intuitives Menü, leiser Betrieb und kompaktes Design sorgen für schnellen, mühelosen Aufbau.



Die **SleepStyle™ 200 CPAP-Serie**
– geschaffen, um alle Sinne zu berühren.

Zukunftsweisende Technologie sorgt für einen erholsamen Schlaf und neue Lebensqualität. **Für weitere Informationen oder zur Ansicht der SleepStyle™ CPAP-Serie fragen Sie Ihren Fisher & Paykel Healthcare Händler oder besuchen Sie uns im Internet unter: www.fphcare.com.**

Ambient Tracking Plus

PACKUNGSINHALT DER SLEEPSTYLE™ 200 CPAP-SERIE:

- CPAP-Gerät
- Tragetasche
- 1 spülmaschinenfeste Befeuchterkammer
- Beatmungsschlauch
- Luftfilter
- Wassertrichter

ZUBEHÖR

- HC013** Rückstellsatz – Unbeheizte Befeuchtung
HC014 Aufrüstsatz – Beheizte Befeuchtung mit spülmaschinenfester Befeuchterkammer
HC355* Spülmaschinenfeste Befeuchterkammer
HC385S Standard-Befeuchterkammer
900HC240 Luftfilter (je 2 Stück)
900HC221 Schlauch, inkl. Adapter
900HC230 Compliance Maximizer™ Software
900HC232 Compliance Download Serielles Kabel
900HC607 Titration Maximizer Software
900HC236 Isolated Serial Adaptor
900HC226 Verlängerungskabel für HC225

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:	10.8" x 6.7" x 5.5" (275mm x 170mm x 140mm)
Gewicht:	4.4 lbs (2kg)
Befeuchterkammervolumen:	400ml
Elektrische Leistung:	
Netzfrequenz	50-60Hz
Spannung und Stromversorgung	100-115V ~ (1.2A, 1.3A max) 220-240V ~ (0.8A, 1.8A max)
Betriebsdruck:	4-20cm H2O



SleepStyle™
CPAP-SERIE STANDARD



SleepStyle™
CPAP-SERIE INTEGRIERT

* Nicht in allen Ländern erhältlich

Quellen: 1. Bacon JP, Farney RJ, Jensen RL et al: Nasal continuous positive airway pressure devices do not maintain the set pressure dramatically when tested under simulated clinical conditions. Chest 2000; 118 (5):1441-9. 2. Martins De Araujo MT, Vieira SB, Vazquez EC et al: Heated humidification or face mask to prevent upper airway dryness during continuous positive airway pressure therapy. Chest 2000; 117 (1):142-7.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI IHREM FISHER & PAYKEL HEALTHCARE FACHHÄNDLER:

Fisher & Paykel Healthcare ist ständig um die Verbesserung seiner Produkte bemüht und behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. In wichtigen Ländern der Welt patentiert.

International P O Box 14 348, Panmure, Auckland 1134, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fphcare.com Web: www.fphcare.com **USA** Tel: 1800 446 3908 +1 949 470 3900 Fax: +1 949 470 3933 **Australia** Tel: +61 3 9879 5022 Fax: +61 3 9879 5232 **Austria** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22 **Benelux** Tel: +31 78 644 0924 Fax: +31 78 644 0914 **China** Tel: +86 20 8363 4286 Fax: +86 20 8363 3595 **France** Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 **Germany** Tel: +49 7182 93777 0 Fax: +49 7182 93777 99 **India** Tel: +91 80 5123 6041 Fax: +91 80 5123 6044 **Irish Republic** Tel: 1800 409 011 **Italy** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japan** Tel: +81 3 3661 7205 Fax: +81 3 3661 7206 **Spain** Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 **Switzerland** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **UK (EU Authorised Representative)** Tel: +44 1628 626 136 Fax: +44 1628 626 146 **Nthn Ireland** Tel: 0800 132 189