

# FlexiFit™ 431

FULL FACE MASK


## Spécifications techniques

### Masque facial



*Utilisation du FlexiFit™  
Technologie d'ajustement  
automatique du contour  
du visage, le masque facial  
FlexiFit™ 431 avec son profil  
sous-mentonnier et sa jupe en  
silicone épousant les contours  
du visage offre un confort et  
une stabilité maximum.*


# Masque facial - FlexiFit™ 431

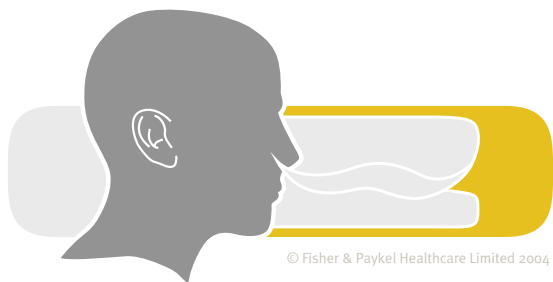

© Fisher & Paykel Healthcare Limited 2004

*Le masque facial FlexiFit™ 431 est une alternative confortable aux voies nasales ou orales, et c'est une solution prête à l'emploi, entièrement montée.*

UN MASQUE AUX CARACTERISTIQUES REMARQUABLES, POUR PLUS DE LIBERTÉ, DE CONFORT ET UNE MEILLEURE OBSERVANCE

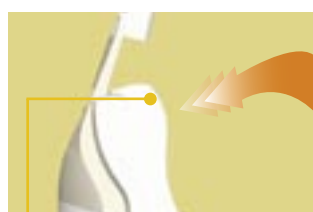


#### Technologie FlexiFit™

Ajustement automatique au contour du visage

##### Mousse

La technologie FlexiFit™ s'ajuste automatiquement à une grande variété de nez et de visages, en une seule opération et sans ajustement compliqué.

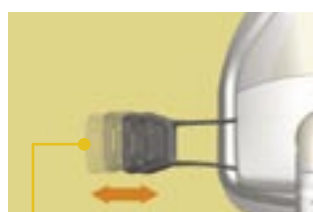

#### Glissière Glider™ Système anti-fuites

La sangle coulissante Glider™ offre une liberté de mouvement tout en assurant l'étanchéité. La pression du masque reste identique lorsque la tête se tourne d'un côté à l'autre, ce qui diminue le risque de fuite.




#### Profil sous-mentonnier Excellente stabilité

Le profil sous-mentonnier renforce la stabilité du masque en constituant un point de référence constant et celui-ci maintient la jupe même en cas de mouvements de la mâchoire pendant la nuit.



#### Efficacité du diffuseur Fonctionnement silencieux

*Sans entretien*  
Ce nouveau diffuseur empêche l'air de souffler sur le conjoint et atténue un bruit qui risquerait de troubler le sommeil.

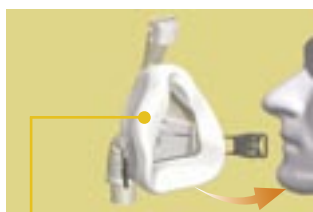

#### Jupe en silicone mat de qualité supérieure Optimisant ainsi l'étanchéité

Cette technologie de jupe est douce au toucher lorsqu'elle glisse sur le visage, et sa texture mat permet d'optimiser l'étanchéité du masque.



#### Sangle crânienne Stabilité accrue

Complète la mentonnière afin de renforcer la stabilité sans avoir besoin d'une supplémentaire sous le menton sangle.



#### Sangle de dégageur rapide et facile Se défait en une seule opération

Il suffit de tirer sur la sangle pour défaire le harnais d'un seul geste. Il n'y a pas besoin d'ajuster le masque continuellement.

#### SOMMAIRE

- Masque complet avec harnais, entièrement monté et prêt à l'emploi
- Choix de la jupe silicone : inclus tailles S, M & L
- Guide d'utilisation simple et facile

CODE DE RÉASSORT: HC431

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR FISHER & PAYKEL LOCAL:

**France** Tél: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221

**International** P O Box 14 348, Panmure Auckland 1134, Nouvelle-Zélande Tél: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fphcare.com Web: www.fphcare.com

**États-Unis** Tél: 1800 446 3908 +1 949 470 3900 Fax: +1 949 470 3933 **Australie** Tél: +61 3 9879 5022 Fax: +61 3 9879 5232 **Autriche** Tél: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22

**Bénélux** Tél: +31 78 644 0924 Fax: +31 78 644 0914 **Chine** Tél: +86 20 8363 4286 Fax: +86 20 8363 3595 **Allemagne** Tél: +49 7182 93777 0 Fax: +49 7182 93777 99

**Inde** Tél: +91 80 5123 6041 Fax: +91 80 5123 6044 **République d'Irlande** Tél: 1800 409 011 **Italie** Tél: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japon** Tél: +81 3 3661 7205 Fax: +81 3 3661 7206

**Espagne** Tél: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 **Suisse** Tél: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **Royaume-Uni (Représentant autorisé de la UE)** Tél: +44 1628 626 136 Fax: +44 1628 626 146

**Irlande du Nord** Tél: 0800 132 189