

FlexiFit™ 431

FULL FACE MASK


Especificaciones

Una Full Face Mask




La Full Face Mask FlexiFit™ 431 se caracteriza porque se adapta perfectamente al contorno de la cara gracias a la Tecnología FlexiFit™ y porque se ajusta bajo la barbilla y viene con un Sello de Silicona altamente moldeable para alcanzar el máximo confort y fijación.

Tratamiento de Full Face Mask - FlexiFit™ 431

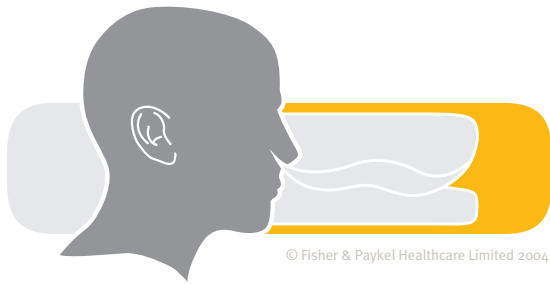


La Full Face Mask FlexiFit™ 431 proporciona un suministro alternativo al tratamiento nasal u oral, muy cómodo y viene completamente armada y preparada para su uso, sólo tiene que sacarla de la caja.

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS PARA UNA MAYOR LIBERTAD, CONFORT Y CUMPLIMIENTO

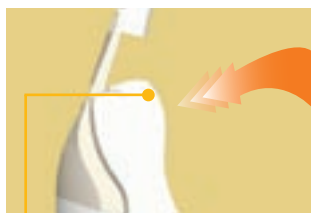


Tecnología FlexiFit™ Fijación de auto-contorno

Con Almohadilla de Aire Gracias a la Tecnología FlexiFit™ la máscara se adapta a una gran variedad de contornos faciales, permitiendo un rápido y fácil ajuste.

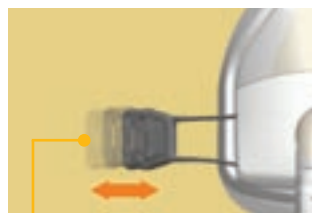

Correa Glider™ Sistema anti-fugas

La correa deslizante Glider™ proporciona una gran libertad de movimiento, al mismo tiempo que mantiene el sellado. La fijación de la máscara se mantiene cuando la cabeza se mueve de un lado hacia otro, minimizando la posibilidad de fugas.

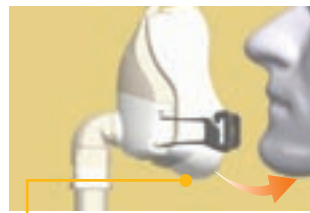


Diseño Bajo la Barbilla Extra Fijación

La máscara se fija Bajo la Barbilla, proporcionando un punto constante de referencia y mantiene el sello incluso cuando se realizan movimientos con la mandíbula durante la noche.



Eficacia del Difusor del Flujo Basal Sin ruidos durante su uso

Sin Necesidad de Mantenimiento Con este sistema avanzado de difusión de aire, el aire expulsado no alcanza a quien duerme a su lado y se reduce el ruido que pueda perturbar el sueño.

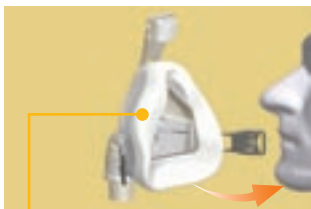

Sello de Silicona Rugoso de gran calidad Para mejorar el sellado

Se ha diseñado este tipo de sellado para su deslizamiento fácil y suave y su textura rugosa mejora el sellado de la máscara.



Correa Crown Estabilidad extra

Complementa el Diseño Bajo Barbilla para lograr una mayor fijación, sin tener que utilizar una correa para la barbilla.



Correa para Retirar Fácilmente Con un solo movimiento

Simplemente tirando de la correa en un solo movimiento, se retira la máscara del arnés. Para volver a colocarla, no es necesario reajustar el arnés.

CONTENIDO

- Máscara con arnés completamente armada y preparada para su uso
- Se incluyen varios tamaños de Sellos de Silicona (S,M,L)
- Guía de Fácil Ajuste para el Usuario

CÓDIGO DE PEDIDO: HC431

PARA MAYOR INFORMACIÓN, POR FAVOR COMUNÍQUESE CON NUESTRO REPRESENTANTE LOCAL DE FISHER & PAYKEL HEALTHCARE:

España Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379

Internacional P O Box 14 348, Panmure Auckland 1134, Nueva Zelanda Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Correo electrónico: info@fphcare.com Web: www.fphcare.com

EE.UU Tel: 1800 446 3908 +1 949 470 3900 Fax: +1 949 470 3933 **Australia** Tel: +61 3 9879 5022 Fax: +61 3 9879 5232 **Austria** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22

Benelux Tel: +31 78 644 0924 Fax: +31 78 644 0914 **China** Tel: +86 20 8363 4286 Fax: +86 20 8363 3595 **Francia** Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 **Alemania** Tel: +49 7182 93777 0

Fax: +49 7182 93777 99 **India** Tel: +91 80 5123 6041 Fax: +91 80 5123 6044 **Irlanda** Tel: 1800 409 011 **Italia** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japón** Tel: +81 3 3661 7205

Fax: +81 3 3661 7206 **Suiza** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **Reino Unido (Representante autorizado para la UE)** Tel: +44 1628 626 136 Fax: +44 1628 626 146

Irlanda del Norte Tel: 0800 132 189