

FlexiFit™ 432

FULL FACE MASK


Spécifications techniques

Masque facial




Notre masque facial de deuxième génération incorpore à la fois une Mousse et une jupe en silicone qui s'adaptent très facilement aux contours du visage, offrant ainsi une meilleure étanchéité et plus de confort.

Masque facial - FlexiFit™ 432

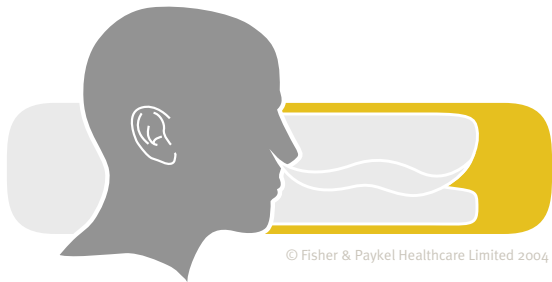

Le masque FlexiFit™ 432 offre une meilleure étanchéité et plus de confort grâce à l'inclusion d'une mousse qui agit de manière interactive avec la jupe en silicone. Ce masque offre une alternative aux interfaces orales ou nasales, et est fourni déjà assemblé, prêt à l'emploi.


UN MASQUE AUX CARACTERISTIQUES REMARQUABLES, POUR PLUS DE LIBERTÉ, DE CONFORT ET UNE MEILLEURE OBSERVANCE

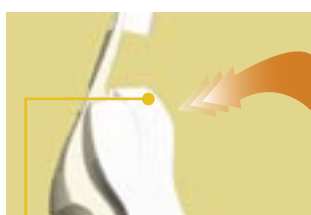

Technologie FlexiFit™


Ajustement automatique au contour du visage

Grâce à la technologie de la mousse du masque FlexiFit™, celui-ci s'adapte automatiquement à un grand nombre de contours faciaux d'un simple geste et sans ajustements compliqués. La mousse offre une meilleure étanchéité et plus de confort.

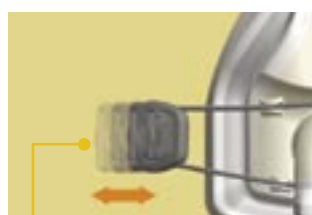


Glissière Glider™ Système anti-fuites

La sangle coulissante Glider™ offre une liberté de mouvement tout en assurant l'étanchéité. La pression du masque reste identique lorsque la tête se tourne d'un côté à l'autre, ce qui diminue le risque de fuite.

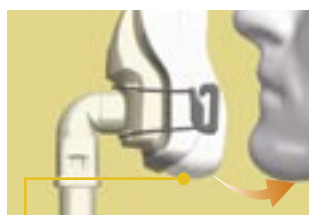

Profil sous-mentonnier Excellente stabilité

Le profil sous-mentonnier renforce la stabilité du masque en constituant un point de référence constant et celui-ci maintient la jupe même en cas de mouvements de la mâchoire pendant la nuit.

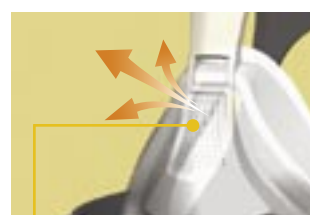

Efficacité du diffuseur Fonctionnement silencieux

Sans entretien
Ce nouveau diffuseur empêche l'air de souffler sur le conjoint et atténue un bruit qui risquerait de troubler le sommeil.




Jupe en silicone mate de qualité supérieure Optimisant ainsi l'étanchéité

Cette technologie de jupe est douce au toucher lorsqu'elle glisse sur le visage, et sa texture mate permet d'optimiser l'étanchéité du masque.



Sangle crânienne Stabilité accrue

Complète la mentonnière afin de renforcer la stabilité sans avoir besoin d'une sangle supplémentaire sous le menton.

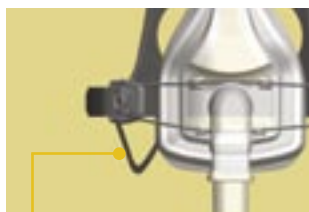

Sangle de dégageur rapide et facile Se défait en une seule opération

Il suffit de tirer sur la sangle pour défaire le harnais d'un seul geste. Il n'y a pas besoin d'ajuster le masque continuellement.

SOMMAIRE

- Masque complet avec harnais, entièrement monté et prêt à l'emploi
- Le masque FlexiFit™ 432 est proposé en trois différentes tailles: Petit, Moyen et Grand
- Guide d'utilisation simple et facile

CODE DE RÉASSORT: HC432

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR FISHER & PAYKEL LOCAL:

France Tél: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221

International P O Box 14 348, Panmure Auckland 1134, Nouvelle-Zélande Tél: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fphcare.com Web: www.fphcare.com

États-Unis Tél: 1800 446 3908 +1 949 470 3900 Fax: +1 949 470 3933 **Australie** Tél: +61 3 9879 5022 Fax: +61 3 9879 5232 **Autriche** Tél: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22

Chine Tél: +86 20 3205 3486 Fax: +86 20 3205 3495 **Allemagne** Tél: +49 7182 93777 0 Fax: +49 7182 93777 99 **Inde** Tél: +91 80 4123 6041

Fax: +91 80 4123 6044 **République d'Irlande** Tél: 1800 409 011 **Italie** Tél: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japon** Tél: +81 3 3661 7205 Fax: +81 3 3661 7206

Netherlands Tél: +31 78 644 0924 Fax: +31 78 644 0914 **Espagne** Tél: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 **Suisse** Tél: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54

Royaume-Uni (Représentant autorisé de la UE) Tél: +44 1628 626 136 Fax: +44 1628 626 146 **Irlande du Nord** Tél: 0800 132 189